


# BOOKANG-BK8005

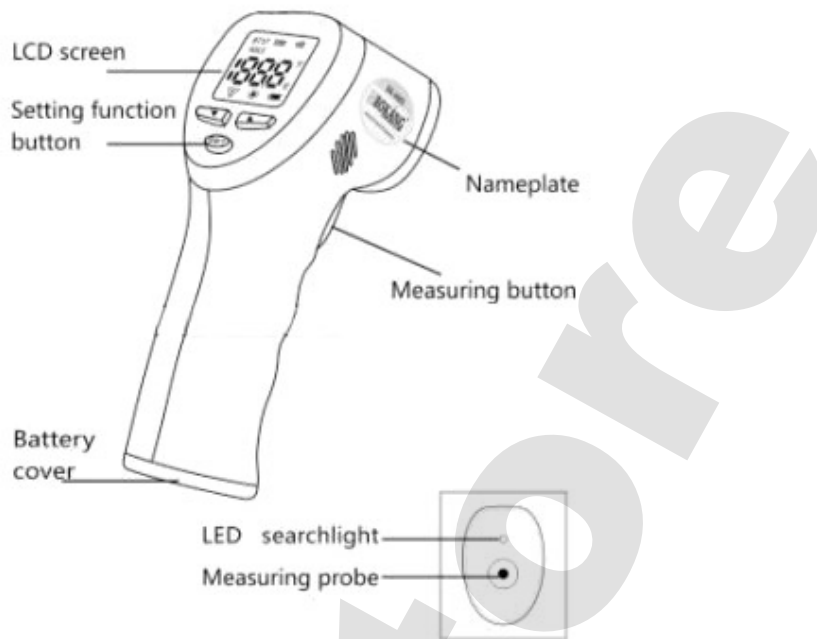

Τοποθετήστε 2 AA αλκαλικές μπαταρίες με σωστή πολικότητα. Αφήστε την συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την μέτρηση. Η θερμοκρασία του χώρου θα πρέπει να είναι μεταξύ 10 και 40°C.

Επιλέξτε τύπο μέτρησης ( BT ή ST ). Κρατήστε σε απόσταση από 3 έως 5 εκατοστά από το αντικείμενο ή το σώμα και πατήστε την σκανδάλη. Η θερμοκρασία θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Πατήστε το κουμπί SET για να δείτε τις προηγούμενες 32 μνήμες και πλοηγηθείτε πατώντας τα βελάκια.

Για να εισέλθετε στο μενού της συσκευής πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SET. Στην Οθόνη θα εμφανιστεί η πρώτη ρύθμιση F-1 ενώ πατώντας διαδοχικά στο κουμπί SET προχωράτε στην επόμενη ρύθμιση F-2 , F-3 κλπ. Για να αλλάξετε μια ρύθμιση πατήστε τα βελάκια.

F-1: Εμφάνιση θερμοκρασίας σε C ή F

F-2: Αλλαγή από μέτρηση θερμοκρασίας σώματος σε μέτρηση θερμοκρασίας αντικειμένων ( BT = Body temperature, ST = Surface temperature )

F-3: Ενεργοποίηση , απενεργοποίηση ηχητικής ειδοποίησης

F-4: Ενεργοποίηση , απενεργοποίηση φωτισμού οθόνης

38.0: Βαθμοί θερμοκρασίας όπου ενεργοποιείται η ηχητική ειδοποίηση

0.0: Ρύθμιση ακριβείας  $\pm 5^{\circ}\text{C}$ . Χρησιμοποιείται για επαναρύθμιση της συσκευής εφόσον απορυθμιστεί ή εφόσον διαθέτετε ένα όργανο μεγαλύτερης ακριβείας και θέλετε να προσαρμόσετε την συσκευή σας.

Χρησιμοποιείτε την συσκευή με προσοχή. Προφυλάξτε την από υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, πτώσεις και χτυπήματα. Αφαιρείται τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή. Κρατήστε την συσκευή μακριά από τα παιδιά.