

POWER GROW COMB

Οδηγίες Χρήσης

Σημαντικές οδηγίες - Φυλάξτε για μελλοντική αναφορά.

Πληροφορίες για την Χτένα Power Grow

Η χτένα Power Grow χρησιμοποιεί λέιζερ και υπέρυθρες λυχνίες LED για την υποστήριξη της τόνωσης των κυττάρων του δέρματος της κεφαλής. Αυτό το επαναστατικό προϊόν μπορεί να βοηθήσει επίσης στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος τοπικά.

Ο συνδυασμός λέιζερ και υπέρυθρων λυχνιών LED βοηθά την ικανότητα διατροφής του θυλάκιου της τρίχας.


Η Χτένα Power Grow επίσης διαθέτει τεχνολογία με δονήσεις για να τονώσει τα θυλάκια των τριχών. Η πατενταρισμένη αγωγή με δόνηση μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος προς τα θυλάκια των τριχών με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της τριχοφυΐας.

Η χτένα δίνει τη δυνατότητα στις ακτίνες λέιζερ και στις υπέρυθρες να εισχωρήσουν μέχρι τα θυλάκια της τρίχας. Τα δόντια της χτένας είναι τοποθετημένα πριν ή μετά από το λέιζερ και τις λυχνίες υπέρυθρων για να δημιουργηθεί τέλειος διαχωρισμός των τριχών.

ΟΔΗΓΙΕΣ


Τοποθέτηση μπαταριών

1. Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών.
2. Εισάγετε 4 μπαταρίες AAA όπως φαίνεται στην εικόνα:

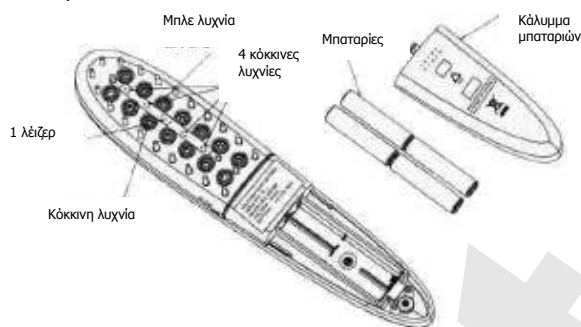

Θέση σε λειτουργία της χτένας Power Grow

Για να λειτουργήσετε τη συσκευή, πατήστε το διακόπτη λειτουργίας και η λυχνία κοντά στο διακόπτη λειτουργίας θα ανάψει κόκκινη. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή έχει τεθεί σε λειτουργία.

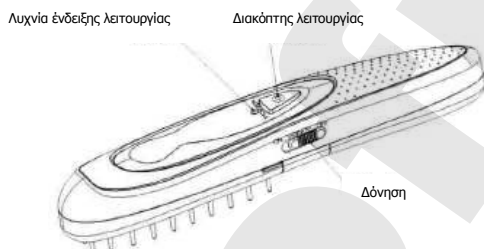

Ενεργοποίηση της λειτουργίας δόνησης

Η χτένα Power Grow λειτουργεί επίσης με δονήσεις. Στο πλαϊνό τμήμα της συσκευής βάλτε το διακόπτη VIBRATE στη θέση ON και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία της δόνησης. Σημείωση: Η δόνηση λειτουργεί μόνο όταν ο διακόπτης λειτουργίας της συσκευής έχει ενεργοποιηθεί.

Αφαίρεση της Χτένας

Αν επιθυμείτε, μπορείτε να βγάλετε την χτένα και να εφαρμόσετε το λέιζερ και τις υπέρυθρες λυχνίες κατευθείαν πάνω στο δέρμα του κεφαλιού σας. Για να αφαιρέσετε την χτένα, βρείτε τις ενδείξεις slide σε κάθε πλευρό της συσκευής και σύρετε το εξάρτημα της χτένας για να το βγάλετε. Για να συνδέσετε ξανά την χτένα, βάλτε την πάλι στην αρχική της θέση. Θα ακούσετε ήχο κουμπώματος (κλικ).



Οδηγίες Χρήσης

Η χτένα Power Grow πρέπει να χρησιμοποιείται σε μαλλιά χωρίς λοσιόν ή ζελέ.

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για 10-15 λεπτά μέρα παρά μέρα. Θα δείτε αποτελέσματα σε περίπου 8-12 εβδομάδες.

Κινήστε τη συσκευή αργά γύρω από το κεφάλι ανάλογα με την κατεύθυνση της ανάπτυξης των μαλλιών, από μπροστά προς τα

πίσω και από κάτω προς πάνω.

Βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε όλο το κεφάλι σας και κινηθείτε αργά με ελεγχόμενες κινήσεις.

Χτένα Μασάζ

Η χτένα για μασάζ είναι ειδικά σχεδιασμένη για να βοηθήσει την κυκλοφορία του αίματος στο δέρμα του κεφαλιού και να βελτιώσει την ανάπτυξη των μαλλιών.

Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε σε στεγνά ή βρεγμένα μαλλιά.

Για μια απολαυστική εμπειρία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την χτένα μασάζ στο ντους για να απλώσετε το σαμπουάν.

Βάλτε τα δάχτυλά σας στις τρύπες της χτένας μασάζ.

Κινήστε την χτένα μασάζ με ελεγχόμενες κυκλικές κινήσεις πάνω στο δέρμα του κεφαλιού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Power Grow Comb (αριθμός μοντέλου WB/096)

Τάση εισόδου

6V (4 μπαταρίες AAA)

Μήκος κύματος

650nm +/- 5nm

Κλάση λέιζερ

4.5 mW 3R

Μήκος κύματος κόκκινης λυχνίας

660 nm +/- 5nm

Μήκος κύματος μπλε λυχνίας

470 nm +/- 5nm

Έξοδος

420 mW χωρίς δόνηση

600 mW με δόνηση

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Επιφανειακή χρήση σε υγιές τριχωτό της κεφαλής. Αποφύγετε την χρήση κοντά στα μάτια. Σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης με τα μάτια, αμέσως συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά. Δεν συνιστάται σε άτομα που είναι αλλεργικά και ευαίσθητα στα μήκη κύματος λειτουργίας της συσκευής.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων (όλο το 24ωρο): 210 7793777